

MANUALE D'USO PER IL RICEVITORE HelpLine V2/1

1. APPLICAZIONE


HelpLine V2/1 è un dispositivo per la segnalazione e l'allarme. Può ricevere dei segnali radio da trasmettitori compatibili e li converte nei segnali ottici ed acustici. Il ricevitore può essere utilizzato sia con un alimentatore collegato (fermo) e con una batteria carica (mobile).



Attenzione: L'attrezzatura del paziente con il trasmettitore non rilascia il controllo della sua salute. Il set è usato per chiedere aiuto, non riporta condizioni potenzialmente letali.

2. SPECIFICHE TECNICHE

- Utilizzo: Il ricevitore radio mobile: 868 MHz
- Carica batteria: 3.7 V, 700 mAh
- Numero di canali: 4
- Caricatore DC 5,5/2,1 (5V ---) connector / 1,5A
- Condizioni d'uso: -20°C hasta +55°C
- Dimensioni: 105x64x28mm
- Peso: 230 g

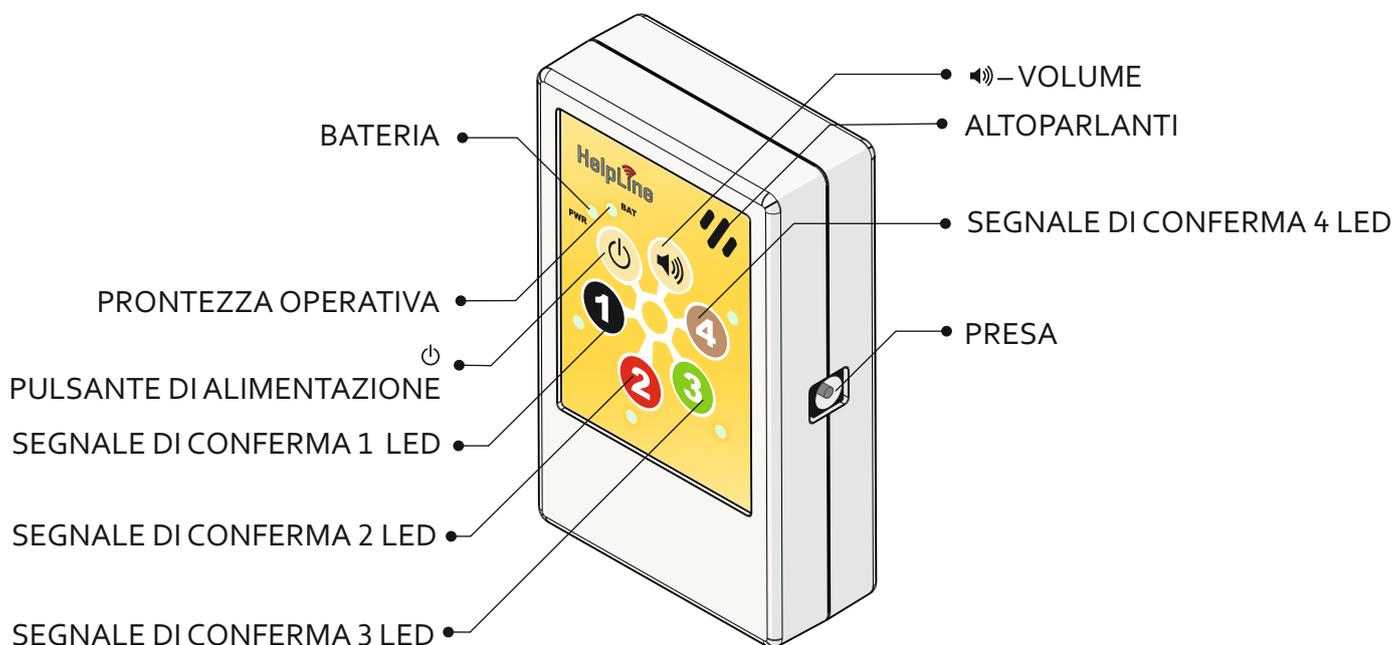

VISTA DEL RICEVITORE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE:

3. DESCRIZIONE DEL RICEVITORE

3.1 Componenti del ricevitore

I componenti che sono importanti per il funzionamento sono sei pulsanti sei LED e la presa.

3.2 Accessori necessari

Affinché il sistema funzioni, è necessario almeno un trasmettitore compatibile e il caricabatterie per ricaricare la batteria.

3.3 Funzioni

I quattro canali di ricezione sono quattro pulsanti con colori del nero (1), rosso (2) verde (3) e cappuccino (4) e assegnato a quattro suonerie. Se un il paging viene ricevuto su un canale, la luce assegnata LED lampeggia e la melodia della suoneria suona ininterrottamente per circa 20 minuti a meno che la chiamata viene spenta premendo il tasto corrispondente (= riconosciuta). Il LED lampeggia anche dopo per circa 20 minuti fino a quando non viene spento (= riconosciuta) tramite il pulsante.

Questo assicura che nessuna chiamata (di emergenza) è sovra sentita / oppure persa. Per ciascun canale 28 trasmettitori compatibili possono essere programmati (programmati).

Se una chiamata non riconosciuta è attiva e il dispositivo riceve una nuova ulteriore chiamata sulla stesso oppure su un altro canale, la chiamata viene salvata e il LED corrispondente lampeggia. Se la chiamata attiva viene riconosciuta la corrispondente suoneria della chiamata memorizzata viene attivata

3.4 Funzionamento

3.4.1 Accensione e spegnimento

Il LED verde si accende dopo circa. 5 secondi premendo il pulsante accensione /spegnimento. Se quindi si rilascia il pulsante di accensione / spegnimento, tutti i 4 LED dei canali lampeggiano in rosso. La luce LED PWR verde poi lampeggia rapidamente diverse volte e poi lentamente al ritmo di circa quattro secondi. Questo indica che il ricevitore è pronto a ricevere, senza dover effettuare chiamate di controllo. Se si preme il pulsante di accensione / spegnimento per circa sette secondi, poi si spegne il ricevitore.

3.4.2 Regolazione del volume

Premere il pulsante VOL per circa 5 secondi. Il LED del canale 1 è acceso Premendo di nuovo il tasto VOL farà la suoneria del canale 1 sempre più forte. L'impostazione viene salvata automaticamente dopo 10 secondi o premendo il tasto

1. L'impostazione del volume viene applicata su tutti i canali.

Il volume di HelpLine 1,0 è limitato al volume della stanza per fini tecnici e progettuali. Si consiglia quindi di indossare il dispositivo sulla persona, o portarlo con voi quando si lascia la stanza.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE:

3.4.3 Carica della batteria

Si consiglia di ricaricare la batteria a fonti principali.

Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di carica e devono essere sostituiti e smaltiti. Per motivi di sicurezza si consiglia di sostituire la batteria dopo 2 anni. Se il "BAT" LED lampeggia in rosso e il ricevitore viene emesso un suono allora la batteria ha raggiunto uno stato di carica basso e deve essere caricata.

Durante la ricarica il LED "BAT" si accende. Il diodo "BAT" si spegne quando la batteria è completamente carica. Se la batteria è estremamente scarica (ad esempio perché il dispositivo non è stato caricato nonostante un diodo lampeggiante "BAT" oppure non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo) il dispositivo non reagisce per 20 minuti, anche quando è collegato alla rete elettrica. Poi si può richiedere diverse ore prima che la batteria sia carica e fin che il dispositivo ritorna allo stato di servizio (la luce PWR LED lampeggia nell'intervallo di circa 4 secondi).

3.4.4 Battery replacement

1. Make sure that the device is turned off.
2. Open the flap at the back of the housing.
3. Remove the used battery and insert a new one paying attention to the polarity. Insert the new battery in accordance with the polarity (+) and (-) indication. The battery should be installed correctly. Incorrect installation of the battery may damage the device.

CAUTION DANGER OF EXPLOSION IN THE CASE OF REPLACEMENT THE BATTERY OF INCORRECT TYPE. USED BATTERIES SHOULD BE DISPOSED ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

4. PROGRAMMAZIONE

4.1 L'apprendimento di trasmettenti (Collegamento trasmettitori con HelpLine)

Premere il tasto del canale per circa 3 secondi, in cui lei desidera programmare la stazione (programmazione) finché il LED associato si accende. Premere e tenere premuto questo tasto mentre premete il tasto del trasmettitore fino a quando il LED lampeggia molto rapidamente e poi si spegne.

4.2 Elimina un trasmettitore associato

Premere e tenere premuti due pulsanti da 1 a 4 e contemporaneamente il trasmettitore corrispondente.

4.3 Elimina tutti i trasmettitori accoppiati

Tenere premuto due pulsanti per 12 secondi.

4.4 Controllare la connessione radio tra trasmettitore e ricevitore prima dell'avvio

Prima di utilizzare il set per il cercapersone, verificare se il cercapersone funziona senza problemi e fino alla distanza desiderata. Le gamme radio sono influenzate in modo significativo dalle condizioni strutturali in loco (pareti, soffitti in calcestruzzo ma anche apparecchiature elettriche come TV e computer possono influenzare le gamme radio).

Procedere come segue: Accendere tutti i dispositivi elettronici nel vicino e ulteriore ambiente operativo del trasmettitore e del ricevitore.

Verificare se la distanza tra trasmettitore e ricevitore è sufficiente aumentando la distanza tra trasmettitore e ricevitore con incrementi di 2 o 3 metri. Il ricevitore deve reagire a un singolo (non ripetuto!) Premere il trasmettitore radio.

Se vengono apportate modifiche nell'ambiente di chiamata (ad esempio, il letto di cura viene cambiato), le ubicazioni dei dispositivi elettronici vengono cambiate o ne vengono messe in funzione nuove, si prega di ricontrollare il raggio d'azione della radio per motivi di sicurezza.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE:

4.4. Pulizia

Per motivi igienici, si prega di lavare regolarmente il braccialetto o la collana. Il (i) trasmettitore (i) e (i) ricevitore (i) possono essere puliti con un panno leggermente umido, se necessario con l'aggiunta di un disinfettante. Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi.

4.5 Controlli regolari

Con controlli visivi regolari e trigger di chiamata test (almeno una volta alla settimana) si controlla la funzionalità del sistema. Assicurarsi che il trasmettitore emetta un "segnale di batteria scarica" (consultare il manuale del trasmettitore).



Importante! Effettuare controlli regolari. In caso di danni o difetti funzionali, non utilizzare il sistema fino alla riparazione / sostituzione. Dopo aver cambiato la batteria, controllare la portata della connessione radio tra trasmettitore e ricevitore come prima della prima accensione.

4.6 Malfunzionamenti

Se si riceve una chiamata e il LED corrispondente lampeggia ma non si sente alcun suono, aprire lo sportello sul retro dell'unità. Rimuovere la batteria dal supporto per alcuni secondi e quindi reinserirla (funziona come un riavvio del computer). Per altri difetti, si prega di contattare la hotline.

5. GARANZIA

Lei si otterrà un trasmettitore testato e funzionante. Durante il periodo di garanzia, noi eliminiamo dei eventuali malfunzionamenti dovuti a difetti di fabbricazione o di materiale senza la necessità di riparazione o della sostituzione. Questa garanzia si applica ad ogni paese.

Esclusi dalla presente garanzia sono: I danni dovuti ad un uso improprio o di forza, oppure dalla normale usura. La garanzia non si effettua se le riparazioni vengono effettuate da persone non autorizzate.

6. ISTRUZIONI PER L'USO E LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Siamo obbligati a richiamare l'attenzione su quanto segue: Le batterie usate e accumulatori (con il simbolo del cestino barrato) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Il trasmettitore contiene una pila a bottone. Né il trasmettitore né la batteria possono essere eliminati con dei rifiuti domestici al termine della sua durata utile. Lo smaltimento può essere effettuato dal rivenditore di fiducia oppure in un punto di raccolta e ritorno a livello locale.

È possibile smaltire gratuitamente le vecchie attrezzature tramite il proprio rivenditore o tramite un punto di raccolta per rifiuti elettronici.

ATTENZIONE! Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE! Non mettere la batteria in bocca. In caso di ingestione, consultare un medico o un centro antiveleni locale.

ATTENZIONE! La batteria usata deve essere portata a un centro di riciclaggio locale.


ATTENZIONE: PERICOLO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO NON CORRETTO.

LE BATTERIE USATE DEVONO ESSERE SMALTITE SECONDO LE ISTRUZIONI.

7. CONFORMITÀ

Con la presente il produttore dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/53 / UE. La dichiarazione di conformità può essere trovata sul sito web del proprio rivenditore specializzato. www.pflegerufset.de.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

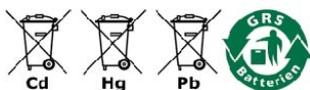

Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber
Pb = Batterie enthält Blei

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE:


ISTRUZIONI PER L'USO DEI TRASMETTITORI HELPLINE

1. IMPIEGO

I trasmettitori HelpLine inviano segnali radio codificati ai ricevitori. La gamma è in campo aperto a circa 100 metri e in casa - in base alle condizioni radio - da 20 a 30 metri.

2. DATI TECNICI

- Fornitura: cella a bottone 3 volt, CR2032
- Frequenza: 868 Mhz
- Uscita ERP: < 10 mW
- Condizioni d'uso da: -20°C a +55°C
- Dimensioni: 63 x 33 x 15mm

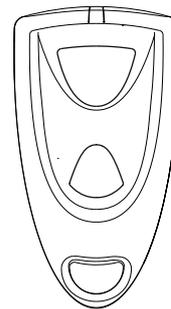


3. TEST BATTERIA

Se il LED lampeggia dopo aver premuto il pulsante del trasmettitore tre volte (ma non dovrebbe più lampeggiare), ciò indica che la batteria è scarica deve essere sostituita. Test regolari assicurano la funzionalità del trasmettitore.

4. CAMBIO BATTERIA

1. Svitare la vite sulla parte inferiore del trasmettitore
2. Sollevare e aprire l'alloggiamento
3. Sostituire la batteria e fissarla nella parte inferiore dell'alloggiamento. Inserire la nuova batteria in conformità con la polarità (+) e (-) indicata sul contenitore della batteria. La batteria deve essere installata nel modo descritto, perchè un'installazione impropria della batteria potrebbe danneggiare il dispositivo.
4. Inserire nella guida e chiudere la parte inferiore dell'alloggiamento
5. Riavvitare la vite.

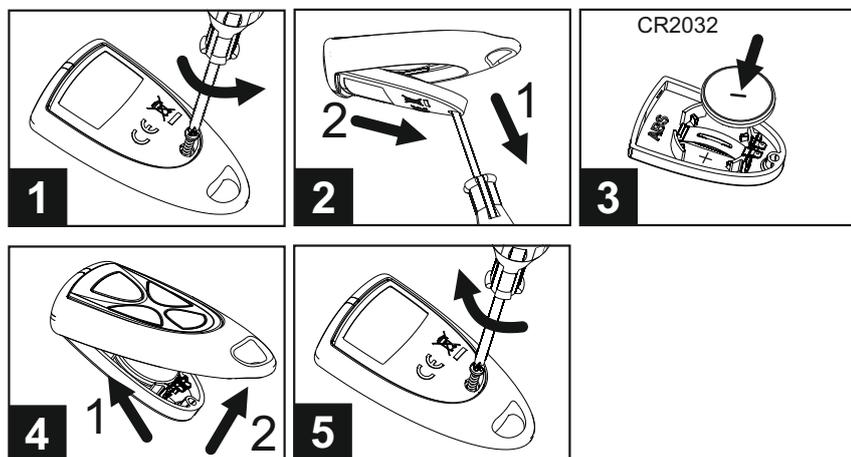

ATTENZIONE: UTILIZZARE SOLO UNA BATTERIA ADATTA AL TRASMETTITORE. IN CASO DI SCAMBIO IMPROPRIO, ESISTE RISCHIO DI ESPLOSIONE.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE:

5. GARANZIA

Hai ricevuto un dispositivo testato e perfettamente funzionante. Diamo una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, ripariamo eventuali malfunzionamenti causati da difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia si applica a ciascun paese. Esclusi dalla garanzia sono i danni dovuti a uso improprio o forza maggiore, normale usura. La garanzia viene eseguita da persone non autorizzate.

6. NOTE SUGLI ATTREZZATURE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Siamo obbligati a richiamare la vostra attenzione su quanto segue:

I rifiuti di pile e accumulatori (con il simbolo del bidone dei rifiuti barrato) non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Il trasmettitore contiene una cella pulsante. Né il trasmettitore né la cella pulsante potrebbero essere alla fine della sua durata. Lo smaltimento può essere effettuato dal rivenditore specializzato o da un punto di raccolta e di ritiro localmente disponibile.

È possibile smaltire la vecchia attrezzatura gratuitamente o tramite un punto di raccolta per rifiuti elettronici tramite il proprio rivenditore specializzato.

ATTENZIONE! Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE! Non mettere la batteria in bocca. In caso di ingestione, consultare un medico o un centro antiveleni locale.

ATTENZIONE! La batteria usata deve essere portata a un centro di riciclaggio locale.

ATTENZIONE: PERICOLO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO NON CORRETTO.

LE BATTERIE USATE DEVONO ESSERE SMALTITE SECONDO LE ISTRUZIONI.

7. CONFORMITÀ


Con la presente il produttore dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/53 / UE. La dichiarazione di conformità può essere trovata sul sito web del proprio rivenditore specializzato. www.pflegerufset.de.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE:

ISTRUZIONI PER L'USO DEI TRASMETTITORI HELPLINE (WRISTBAND)

1. APPLICAZIONE

I trasmettitori HelpLine inviano segnali radio codificati ai ricevitori. La gamma è in campo aperto a circa 100 metri e in casa - in base alle condizioni radio - da 20 a 30 metri.

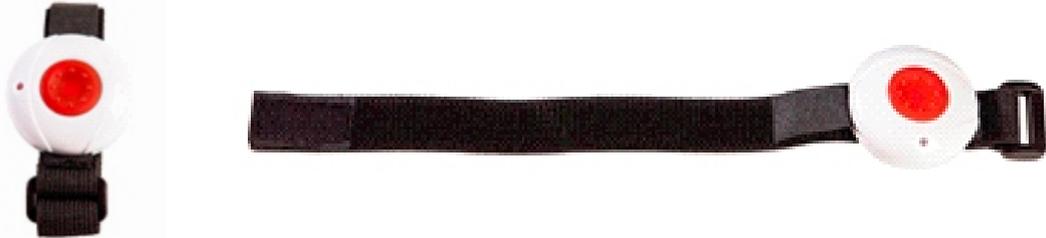

2. DATI TECNICI


- Frequenza: 868 Mhz
- Fornitura: cella a bottone 3 volt, CR2016
- Uscita ERP: < 10 mW
- Condizioni d'uso da -20°C a +55°C
- Dimensioni: 63 x 33 x 15mm

3. TEST BATTERIA

Se il LED lampeggia dopo aver premuto il pulsante del trasmettitore tre volte (ma non dovrebbe più lampeggiare), ciò indica che la batteria è scarica deve essere sostituita. Test regolari assicurano la funzionalità del trasmettitore.

4. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Svitare la vite sulla parte inferiore del trasmettitore
2. Sollevare e aprire l'alloggiamento
3. Sostituire la batteria e fissarla nella parte inferiore dell'alloggiamento
4. Inserire nella guida e chiudere la parte inferiore dell'alloggiamento. Inserire la nuova batteria in conformità con la polarità (+) e (-) indicata sul contenitore della batteria. La batteria deve essere installata nel modo descritto, perchè un'installazione impropria della batteria potrebbe danneggiare il dispositivo.
5. Riavvitare la vite

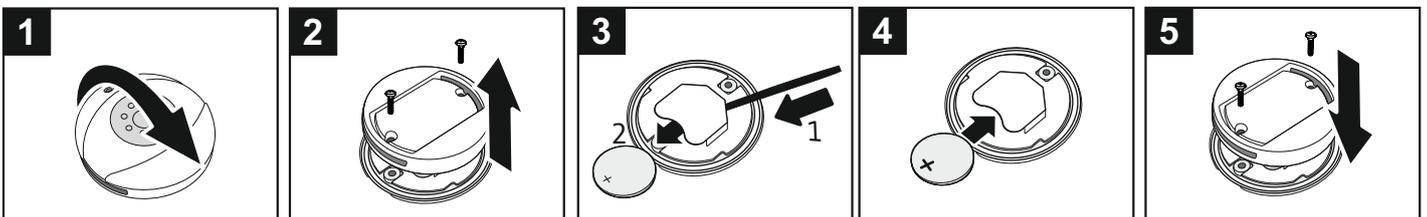

ATTENZIONE: UTILIZZARE SOLO UNA BATTERIA ADATTA AL TRASMETTITORE. IN CASO DI SCAMBIO IMPROPRIO, ESISTE RISCHIO DI ESPLOSIONE.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE:

5. GARANZIA

Hai ricevuto un dispositivo testato e perfettamente funzionante. Diamo una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, ripariamo eventuali malfunzionamenti causati da difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia si applica a ciascun paese. Esclusi dalla garanzia sono i danni dovuti a uso improprio o forza maggiore, normale usura. La garanzia viene eseguita da persone non autorizzate.

6. NOTE SUGLI ATTREZZATURE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Siamo obbligati a richiamare la vostra attenzione su quanto segue:

I rifiuti di pile e accumulatori (con il simbolo del bidone dei rifiuti barrato) non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Il trasmettitore contiene una cella pulsante. Né il trasmettitore né la cella pulsante potrebbero essere alla fine della sua durata. Lo smaltimento può essere effettuato dal rivenditore specializzato o da un punto di raccolta e di ritiro localmente disponibile.

È possibile smaltire la vecchia attrezzatura gratuitamente o tramite un punto di raccolta per rifiuti elettronici tramite il proprio rivenditore specializzato.

ATTENZIONE! Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE! Non mettere la batteria in bocca. In caso di ingestione, consultare un medico o un centro antiveleni locale.

ATTENZIONE! La batteria usata deve essere portata a un centro di riciclaggio locale.

ATTENZIONE: PERICOLO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO NON CORRETTO.

LE BATTERIE USATE DEVONO ESSERE SMALTITE SECONDO LE ISTRUZIONI.

7. CONFORMITÀ

Con la presente il produttore dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/53 / UE. La dichiarazione di conformità può essere trovata sul sito web del proprio rivenditore specializzato. www.pflegerufset.de.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE: